



48 par boîte :
emballage pratique
et économique
avec câble

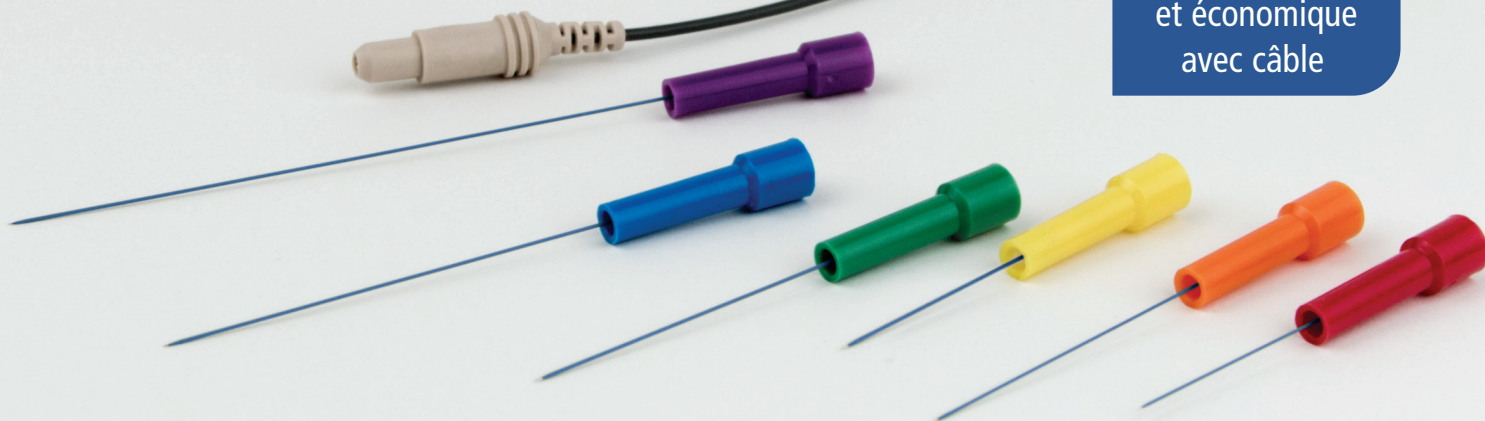

Nouveau revêtement plus lisse pour un confort optimal du patient

Électrodes aiguilles monopolaires jetables fines « S » TECA® Elite

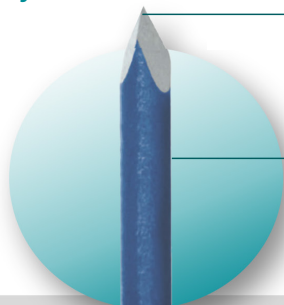


L'aiguille TECA Elite est dotée d'une pointe pyramidale ultrafine à 3 pans pour le plus grand confort du patient.

Revêtement à faible friction

Aiguille en acier inoxydable avec revêtement et une pointe ultra-fine pour faciliter l'insertion et améliorer le confort du patient

Électrodes aiguilles monopolaires jetables TECA® « TP »

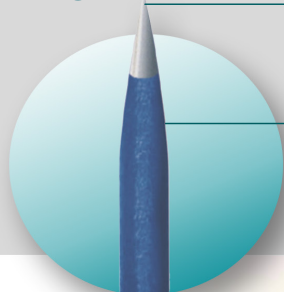

Extrémité conique et tranchante sans revêtement

Revêtement à faible friction

L'extrémité conique répartit les fibres musculaires au lieu de les couper.

L'aiguille « TP » de TECA est idéale pour les patients sujets à des saignements excessifs.

Électrodes-aiguilles monopolaires jetables Elite de TECA®

Le nouveau revêtement perfectionné bleu glacier réduit la force de frottement de l'aiguille après l'insertion et améliore le confort du patient

- Revêtement bleu glacier à faible friction pour faciliter le repositionnement
- Chaque taille d'aiguille a sa propre couleur pour identifier facilement les aiguilles
- Niveaux d'impédance toujours faibles pour des enregistrements précis
- Câble de connexion souple réutilisable inclus dans chaque boîte.
- Conditionnement idéal avec un câble et 48 aiguilles par boîte
- Pré-stérilisées

Toutes les fournitures de Natus Neurodiagnostic sont validées pour être utilisées avec les dispositifs médicaux Natus appropriés afin d'assurer une qualité de signal et une performance souhaitées pendant les tests sur les patients.


Caractéristiques techniques

Électrodes aiguilles monopolaires jetables « S » (fine) TECA® Elite

Référence	Longueur	Diamètre de l'aiguille	Couleur de l'embase	Surface d'enregistrement (mm²)	Quantité
902-DMF25-S	25 mm (1,0 po)	0,36 mm (28G)	Rouge	0,28	1/sachet– 48/boîte
902-DMG25-S	25 mm (1,0 po)	0,46 mm (26G)	Jaune	0,34	1/sachet– 48/boîte
902-DMF37-S	37 mm (1,5 po)	0,36 mm (28G)	Orange	0,28	1/sachet– 48/boîte
902-DMG37-S	37 mm (1,5 po)	0,46 mm (26G)	Vert	0,34	1/sachet– 48/boîte
902-DMG50-S	50 mm (2,0 po)	0,46 mm (26G)	Bleu	0,34	1/sachet– 48/boîte
902-DMG75-S	75 mm (3,0 po)	0,46 mm (26G)	Violet	0,34	1/sachet– 24/boîte

Électrodes aiguilles monopolaires jetables TECA® « TP »


Référence	Longueur	Diamètre de l'aiguille	Couleur de l'embase	Surface d'enregistrement (mm²)	Quantité
902-DMF25-TP	25 mm (1,0 po)	0,36 mm (28G)	Rouge	0,28	1/sachet– 48/boîte
902-DMG25-TP	25 mm (1,0 po)	0,46 mm (26G)	Jaune	0,34	1/sachet– 48/boîte
902-DMF37-TP	37 mm (1,5 po)	0,36 mm (28G)	Orange	0,28	1/sachet– 48/boîte
902-DMG37-TP	37 mm (1,5 po)	0,46 mm (26G)	Vert	0,34	1/sachet– 48/boîte
902-DMG50-TP	50 mm (2,0 po)	0,46 mm (26G)	Bleu	0,34	1/sachet– 48/boîte
902-DMG75-TP	75 mm (3,0 po)	0,46 mm (26G)	Violet	0,34	1/sachet– 24/boîte

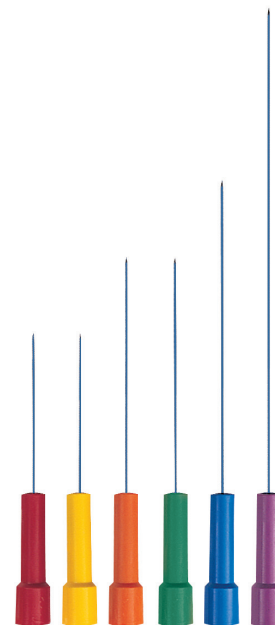

Fil conducteur réutilisable

Fourni avec les électrodes-aiguilles monopolaires à usage unique de TECA.

Référence	Longueur	Description	Extrémité de l'électrode	Extrémité du câble	Quantité
902-RLC-TP	61 cm (24 po)	Câble non-blindé	Connecteur DMN	1,5 mm, protégé des contacts	6/emballage

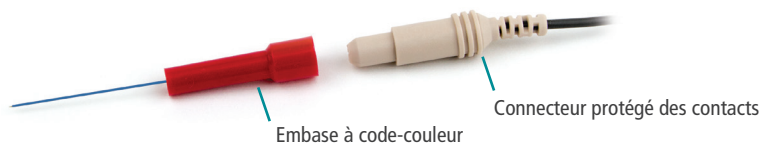

Matériaux

Électrode

Aiguille Acier inoxydable
 Revêtement de l'aiguille PTFE Bleu
 Embase Laiton, plaquée cuivre/nickel
 Protège-embase en couleur Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
 Tube protecteur Polyéthylène

Conditionnement

Sachet Tyvek/EVA
 Boîte Carton

Stérilisation

Type Irradiation gamma
 Durée de conservation 3 ans

Conditions environnementales

Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel / Conformité RoHS
 Température de stockage -17,7 °C à 55 °C (0 °F à 132 °F)

Consommables

Natus propose une gamme complète de fournitures de diagnostic neurologique, accompagnée des avantages suivants :

- Un service à la clientèle dévoué et compétent
- Une procédure de commande simplifiée
- Livraisons récurrentes et envois automatiques pour gagner du temps et de l'argent avec le programme permanent de commandes Natus Choice
- Un système de commande en ligne pratique (clients américains seulement) Natus Medical Store – natusmedicalstore.com.

Pour en savoir plus sur les produits Natus, contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.

Numéro pour la clientèle américaine : 1-800-356-0007
 Numéro pour la clientèle française : +33-5-56-08-54-76

Making sense of the body's signals

©2024 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques de commerce ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. 036312-FR RevE

natus

Natus Medical Incorporated

natus.com