


# TECA® Elite Monopolar Needles

48 pro Packung –  
praktisch und  
hochwertig verpackt  
mit Kabel

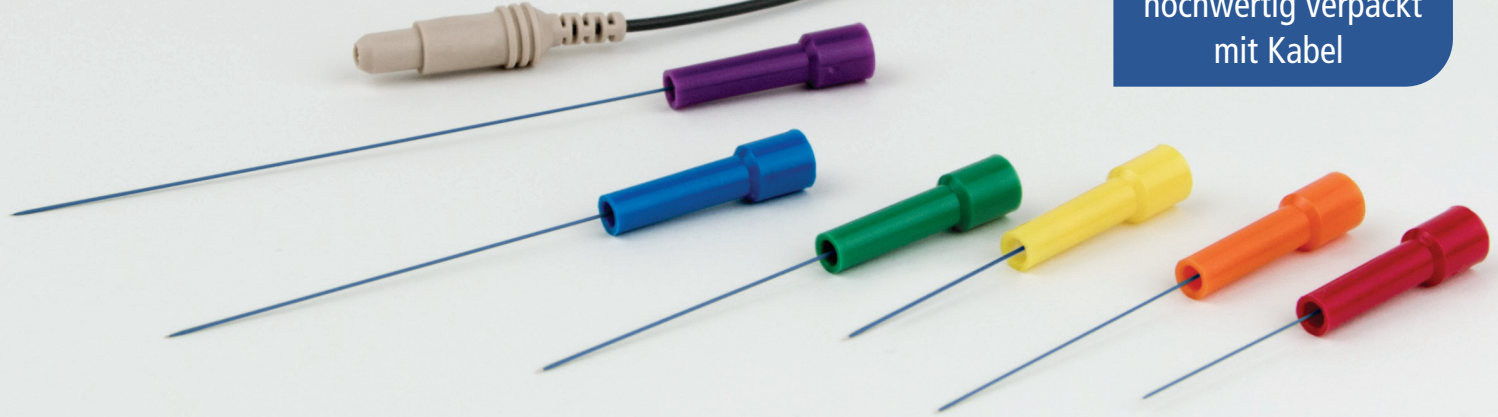

## Neue, glattere Beschichtung für optimalen Patientenkomfort

### TECA® Elite einmal verwendbare monopolare „S“-Nadelelektroden

Die TECA Elite-Nadel verfügt über eine äußerst scharfe, freiliegende 3-Punkt-Pyramidenspitze für ultimativen Patientenkomfort.

**Reibungsarme Beschichtung**  
Die beschichtete Edelstahl-nadel mit äußerst scharfer Spitze erleichtert den Einstich und erhöht den Patientenkomfort.

### TECA® einmal verwendbare monopolare „TP“-Nadelelektroden

Scharfe, konische, freiliegende Spitze

Reibungsarme Beschichtung

Die konische Spitze dehnt die Muskelfasern aus, anstatt sie zu durchtrennen.

Die TECA „TP“-Nadel ist ideal für Patienten, die zu übermäßigem Bluten neigen.

### TECA® Elite einmal verwendbare monopolare Nadelelektroden

Die neue und verbesserte eisblaue Beschichtung reduziert die Reibungskraft der Nadel nach dem Einstich und erhöht den Patientenkomfort

- Reibungsarme eisblaue Beschichtung ermöglicht einfache Neupositionierung
- Farbcodierung nach Nadelgröße sorgt für einfache Identifikation
- Konsistent niedrige Impedanzwerte ermöglichen genaue Aufnahmen
- Wiederverwendbares, biegsames Elektrodenkabel in jedem Karton enthalten
- Praktisch verpackt mit Kabel und 48 Nadeln pro Packung
- Steril

Das gesamte Natus Neurodiagnostisches Zubehör ist für die Verwendung mit den entsprechenden Medizinprodukten von Natus validiert, um die gewünschte Signalqualität und -leistung bei Patiententests zu gewährleisten.

natus®

# TECA® Elite Monopolar Needles


## Technische Daten

### TECA® Elite einmal verwendbare monopolare „S“-Nadelelektroden

Teilenummer	Länge	Nadeldurchmesser	Nabenfarbe	Aufzeichnungsfläche (mm²)	Menge
902-DMF25-S	25 mm	0,36 mm (28G)	Rot	0,28	1 VE – 48 Stück
902-DMG25-S	25 mm	0,46 mm (26G)	Gelb	0,34	1 VE – 48 Stück
902-DMF37-S	37 mm	0,36 mm (28G)	Orange	0,28	1 VE – 48 Stück
902-DMG37-S	37 mm	0,46 mm (26G)	Grün	0,34	1 VE – 48 Stück
902-DMG50-S	50 mm	0,46 mm (26G)	Blau	0,34	1 VE – 48 Stück
902-DMG75-S	75 mm	0,46 mm (26G)	Violett	0,34	1 VE – 24 Stück

### TECA® einmal verwendbare monopolare „TP“-Nadelelektroden

Teilenummer	Länge	Nadeldurchmesser	Nabenfarbe	Aufzeichnungsfläche (mm²)	Menge
902-DMF25-TP	25 mm	0,36 mm (28G)	Rot	0,28	1 VE – 48 Stück
902-DMG25-TP	25 mm	0,46 mm (26G)	Gelb	0,34	1 VE – 48 Stück
902-DMF37-TP	37 mm	0,36 mm (28G)	Orange	0,28	1 VE – 48 Stück
902-DMG37-TP	37 mm	0,46 mm (26G)	Grün	0,34	1 VE – 48 Stück
902-DMG50-TP	50 mm	0,46 mm (26G)	Blau	0,34	1 VE – 48 Stück
902-DMG75-TP	75 mm	0,46 mm (26G)	Violett	0,34	1 VE – 24 Stück

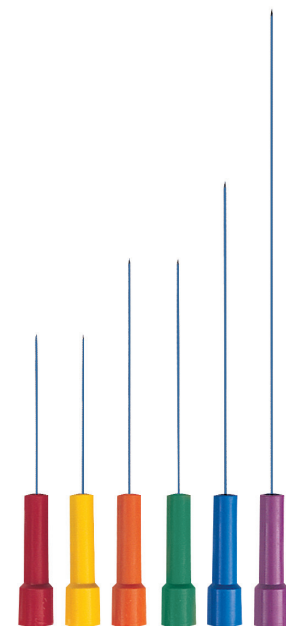

## Wiederverwendbares Elektrodenkabel

Im Lieferumfang TECA Elite einmal verwendbarer monopolarer Nadelelektroden enthalten

Teilenummer	Länge	Beschreibung	Elektrodenende	Kabelende	Menge
902-RLC-TP	61 cm	Ungeschirmtes Kabel	DMN-Steckverbinder	1,5 mm, berührungssicher	6/Pkg



## Materialien

Elektrode  
 Nadel ..... Edelstahl  
 Nadelbeschichtung ..... PTFE blau  
 Ansatz ..... Messing, verkupfert/vernickelt  
 Farbige Ansatzabdeckung ..... Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)  
 Schutzhülse ..... Polyethylen  
 Verpackung  
 Beutel ..... Tyvek/EVA  
 Karton ..... Pappe

## Sterilisation

Art ..... Gamma-Strahlung  
 Haltbarkeit ..... 3 Jahre

## Umgebungsdaten

Enthält keinen Naturkautschuk/RoHS-konform  
 Lagerungstemperatur ..... -17,7 °C bis 55 °C

## Zubehör

Natus bietet ein umfassendes Sortiment von neurodiagnostischem Zubehör sowie:

- Engagierten und kompetenten Kundendienst
- Effizientes Bestellverfahren
- Wiederkehrende Lieferungen und automatischer Versand, um Zeit und Geld zu sparen mit dem Dauerauftragsprogramm „Natus Choice“
- Praktische Internet-Bestellungen [Natus Medical Store – natusmedicalstoreeu.com/de/](https://natusmedicalstoreeu.com/de/)

Natus Europe GmbH

Tel: +49 (0)89 262 027 976

verkauf@natus.com

## Making sense – Die Signale des Körpers verstehen!

©2024 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle auf diesem Dokument erscheinenden Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken im Besitz, lizenziert, beworben oder vertrieben von Natus Medical Incorporated, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. 036311-DE RevE

**natus**®

Natus Medical Incorporated

[natus.com](https://natus.com)